

[제품명]

SOMATOM go.All

[허가번호]

D 수인 21-4049호

[버전정보]

VA30x / VA40x / VB10x / VB20x

[사용목적]

복수의 X선 tube와 검출기를 이용하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 전신의 단층면 영상을 얻는 기구

[사용방법]**가. 사용 전 준비 사항**

- (1) 온도 및 습도를 규격에 맞게 유지하여야 한다. (18°C-30°C, 20-75%)
- (2) 장비를 사용하기 전에 사용자는 안전과 관련된 모든 부분의 기능을 정확히 이해하고 사용할 수 있어야 하며, 사용할 때 안내사항 및 램프 등을 주의 깊게 관찰하여야 한다.
- (3) 육안검사로 촬영 영역 내에 불필요한 이물질(조영제, 인공물, 핀)이 있는지를 검사하며, 엑스선 방사 시 표시램프의 작동상태를 점검한다.

나. 조작방법**1. 시스템 시작 및 종료****1) 시스템 전원 켜기**

- (1) 시스템을 시작하기 전에, 프린터와 같은 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
다음과 같은 방법을 사용하여 시스템을 켤 수 있습니다.

- (2) 다음 버튼 중 하나를 누릅니다.

- ① 겐트리 스탠드 측면에 위치한 겐트리 커넥터 상자의 On/Off(켜기/끄기) 버튼



- (1) USB 인터페이스
- (2) On/Off(켜기/끄기) 버튼
- (3) SD 카드 인터페이스


- ② 백 스위치가 설치된 경우, 백 스위치 ON(켜기) 버튼

- ③ LCB(Line Connection Box, 라인 연결 상자, 옵션)가 설치된 경우, LCB의 전원 스위치

- (3) 시스템이 모든 구성 요소에 전원을 연결하고, 의료 소프트웨어가 스플래시 화면을 표시합니다 시스템이 Home(홈) 화면을 표시하면 완전히 조작 가능한 상태가 되고, 제어 상자의 키가 켜진 상태로 유지됩니다

- (4) 안전한 작동을 보장하고 불규칙성을 교정하기 위해, 이 시스템은 점검 절차를 제공합니다.

- ① 점검 절차를 수행하기 전 반드시 검사실 내에 사람이 없는지 확인해야 합니다. 설정(setting)이나 초기 화면(Home)에서 시스템 점검(system check)을 클릭 후, "Go"를 클릭합니다.

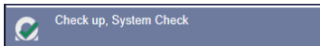

- ② 시스템이 준비가 되면 사용자에게 시작 버튼을 누르라는 안내 메시지가 화면에 나타납니다.

제어 상자의 시작 버튼을 누릅니다. 점검 절차 완료 후에는 점검 절차 팝업 메시지가 사라지고 중앙 하단에 완료 메시지가 표시됩니다.



- ③ 시스템은 자동으로 이 절차를 요청하며, 사용자가 실행 여부를 결정할 수 있습니다. 팝업 메시지로 예정된 점검이 표시되며, 사용자는 이를 닫을 수 있습니다. 그러나, 점검을 특정 기간 동안 실행하지 않으면, 점검을 실행할 때까지 팝업 메시지가 syngo Acquisition Workplace의 화면에 지속적으로 표시됩니다.

2) 기능검사

시스템이 작동 준비가 되고 모든 안전 관련 기능이 제대로 작동하는지 확인하려면 실제 검사 절차를 시작하기 전에 매일 기능 테스트를 수행해야 합니다. 테스트에서는 가장 중요한 기능 절차와 시스템 안전 장비를 점검합니다.

(1) STOP(중지) 키 점검(필수)

- ① 원격 스캔 컨트롤이나 제어 상자에 있는 테이블 이동 키 중 하나를 누르고 누른 상태로 있습니다.



- ② 환자 테이블이 이동하면 제어 상자나 겐트리에 있는 STOP(중지) 키를 누릅니다. 테이블 이동이 즉시 중지되어야 합니다.



- ③ STOP(중지) 키를 누른 후 겐트리에서 환자 테이블을 수동으로 이동할 수 있는지 점검합니다.

(2) 환자 테이블 상판 점검(필수)

- ① 테이블 상판이 움직이는지와 깨끗한지를 점검해야 합니다.
- ② 스캔 필드에 잔류 조영제, 혈액 또는 기타 오염이 없는지 확인합니다.
- ③ 겐트리에서 테이블 상판의 핸들을 당겨 수동으로 후진시킬 수 있는지 확인합니다.



- ④ PMM 인터페이스의 작동상태 및 오염이 없는지 확인합니다.



(1) 푸시 버튼

(2) PMM 인터페이스

(3) 방사선 차단 및 경고등 점검

- ① 제어 상자, 원격 스캔 컨트롤, 겐트리, 그리고 해당되는 경우 검사실 문 옆에 있는 방사선 경고 등을 점검해야 합니다.
- ② 일일 영상 화질 테스트 중에 방사선 경고등이 제대로 작동하는지 점검합니다. 방사선이 방출되면 방사선 경고등이 켜져야 합니다.
- ③ 검사실 문이 열려 있을 때 방사선이 즉시 중지되는지 확인합니다.
- ④ 문을 다시 닫은 후 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

(4) 레이저 마커 점검

- ① 레이저 마커를 켜고 흰색 종이에 라이트 빔이 투영되는지 점검합니다.

② 레이저빔은 십자선을 투영해야 하고 기준 수준 레이저빔은 라인 마크를 투영해야 합니다.

③ 레이저 광선 때문에 시력을 잃을 수 있습니다. 조정 중에 레이저 빔을 직접 쳐다보거나 거울과 같이 매끄러운 표면에 반사되는 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.

(5) 인터컴 시스템 점검(옵션)

① 제어 상자의 Call patient(환자에게 말하기) 키와 Listen to patient(환자말 듣기) 키가 작동하는지 점검합니다.

(6) 원격스캔컨트롤(유선/무선) 및 태블릿 점검(옵션)

① 사용 전 시스템에 유선연결, 페어링 및 충전이 되어 있는지 항상 확인합니다.

3) 시스템에 로그인

① 현장의 보안 정책에 따라 시스템 시동 후 시스템에 로그인해야 할 수도 있습니다. 시스템 시작 후 로그인이 표시되지 않는 경우, "meduser"로 로그인 된 것입니다.

② 액세스 도구 모음에서 사용자 이름을 클릭하여 Logon(로그온) 대화상자를 엽니다.

③ 사용자 이름과 비밀번호를 해당 필드에 입력합니다.

④ 필요할 경우 도메인을 선택합니다. 최초 로그인 후에는 시스템이 도메인을 기억합니다.

⑤ OK(확인)를 클릭해서 확인합니다.

4) 시스템 끄기

(1) Home(홈)에서 시스템을 끄기

① 모든 실행 중인 검사를 종료하고 모든 애플리케이션을 닫습니다.

② 액세스 도구 모음에서 Home(홈) 아이콘을 클릭합니다.

③ Home(홈)에서 Shutdown(종료) 아이콘 아래에 있는 화살표를 클릭합니다.

④ Shut down System(시스템 종료)을 선택합니다. 대화 상자가 표시됩니다.

⑤ Yes(예) 또는 No(아니요)를 클릭하여 계속합니다. No(아니요)를 선택하면 Home(홈)으로 이동합니다.

⑥ Yes(예)를 선택하면 Shutdown(종료) 대화 상자가 열리고 종료 프로세스의 진행 상황이 표시됩니다. 시스템이 종료될 때 미결 워크플로가 닫히고 결과가 저장됩니다.

(2) 시스템 수동으로 끄기

① 오른쪽 캔트리 스탠드에 위치한 캔트리 커넥터 상자의 On/Off(켜기/끄기) 버튼을 눌러서 시스템을 종료할 수 있습니다. 캔트리와 콘솔 작업 공간이 실행 중인지 확인한다.

② 다음 버튼 중 하나를 누릅니다.

• 오른쪽 캔트리 스탠드에 위치한 캔트리 커넥터 상자의 On/Off(켜기/끄기) 버튼

• 벽 스위치가 설치된 경우, 벽 스위치 OFF(끄기) 버튼

• LCB(라인 연결 상자, 옵션)가 설치된 경우, LCB의 전원 스위치

③ 타이머 대화 상자에 시스템 종료에 대한 정보가 표시됩니다. 위에서 언급한 버튼을 한 번 더 눌러서 종료를 취소할 수 있습니다.

④ 종료를 확인하면 시스템이 모든 작업을 마치고 종료를 진행합니다. 취소하려면 Force Shutdown(강제 종료)을 클릭합니다.

(3) 시스템 다시 시작

① 모든 실행 중인 검사를 종료하고 모든 애플리케이션을 닫습니다.

② 보조 콘솔에 있는 동료에게 시스템이 종료된다고 알립니다. 보조 콘솔의 저장되지 않은 데이터는 자동으로 저장됩니다.

액세스 도구 모음에서 Home(홈) 아이콘을 클릭합니다.

Home(홈)에서 Shutdown(종료) 아이콘 아래에 있는 화살표를 클릭합니다.

Restart System(시스템 다시 시작)을 선택합니다.

시스템이 종료되고 다시 시작됩니다.

2. 환자등록 및 촬영

1) 시스템 제어

조정콘솔의 영상시스템(syngo Acquisition Workplace) 과 태블릿(선택사양, GO application) 은 동기화 됩니다. 영상시스템에서는 항상 시스템 제어가 가능합니다.

(1) 영상시스템(syngo Acquisition Workplace)



① 작업 흐름 제어: 검사 작업을 시간 순으로 표시합니다: Protocol, Topogram, Scan, Reconstruction, Close(프로토콜, 토포그램, 스캔, 재구성, 닫기).

② 환자 자세 영역: 현재 환자 자세와 자세 제어 아이콘을 표시합니다.

③ 실행 제어: 제어 버튼

④ 시간 표시 막대: 나타나는 시간 순으로 스캔 범위를 시간 축에 표시합니다.

⑤ 파라미터 패널: 사용 가능한 스캔 및 재구성 파라미터를 표시합니다. 파라미터 패널은 기본적으로 표시되지 않습니다.

⑥ Recon Ranges(재구성 범위) 영역: 각 스캔 범위의 재구성 범위를 표시합니다. 재구성 범위는 재구성 아이콘으로 표시됩니다.

⑦ Tomo(토모) 세그먼트: 획득한 Tomogram(토모그램)을 표시합니다.

⑧ Topo(토포) 세그먼트: 획득한 Topogram(토포그램)을 표시합니다.

⑨ CARE Profile: 선량 곡선을 표시합니다

(2) 태블릿(선택사양)


검사실에서는 여러 태블릿이 제공됩니다. 태블릿의 Scan&GO 애플리케이션을 사용하여 검사실 내에서 기본 워크플로를 수행할 수 있습니다. Syngo Acquisition Workplace와 동기화되어 있습니다. 무선으로 시스템과 데이터 통신이 이루어집니다.

태블릿은 사용전에 충전상태와 페어링 상태를 확인한 후 사용합니다. 캔트리 태블릿을 캔트리에 부착할 수 있으며, 캔트리 태블릿을 캔트리에 부착하고 시스템 전원을 켜면 태블릿이 충전됩니다.



캔트리 태블릿을 자석식 도킹 스테이션 충전기에 위치하면 충전됩니다. 도킹 스테이션은 벽에 걸거나 제어실 등에서 테이블 위, 또는 환자테이블 옆에 놓을 수 있습니다.





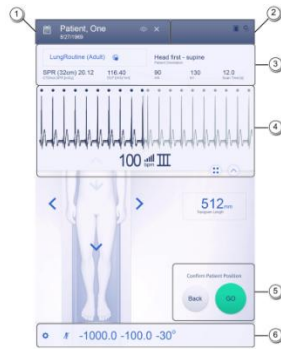

- ① Patient data display (환자 정보 표시)
- ② Information icons display (정보 아이콘 표시)
- ③ Scan parameters display (스캔 파라미터 표시)
- ④ Physiological data display (생리학적 신호 표시)
- ⑤ Execution control (실행 제어 표시)
- ⑥ Tools area (도구 모음 표시)


(3) 주요 도구 모음

아이콘	명칭 및 설명
	Exam(검사) 스캔 워크플로를 시작합니다.
	Emergency Patient(응급 환자) 응급 환자를 등록할 수 있는 도구입니다.
	Add Patient(환자 추가) 스캐너 작업 공간에서 로컬로 새로운 환자를 등록할 수 있는 도구입니다.
	Add Procedure(절차 추가) 등록된 환자에 절차를 추가할 수 있는 도구입니다.
	Broad Query(광범위 조회) 특정 시간 범위의 Patients(환자) 목록을 RIS로부터 새로 고칩니다.(RIS에 연결된 경우에만 사용 가능)
	Patient Query(환자 조회) 선택된 RIS로부터 환자 데이터와 절차 데이터를 읽어옵니다.(RIS에 연결된 경우에만 사용 가능)
	Delete Procedure(절차 삭제) 검사가 아직 시작되지 않은 경우, Patients(환자) 목록에서 로컬로 등록된 환자를 삭제합니다.
	Manage Raw Data(로우 데이터 관리) 로우 데이터를 삭제하거나 내보내거나 가져올 수 있는 Manage Raw Data(로우 데이터 관리) 대화상자를 엽니다.
	Recon(재구성) 오프라인 재구성을 시작합니다.
	Patient Browser(환자 검색기) 열기
	Job View(작업 보기) 열기
	Settings(설정) 메뉴 열기
	일반 온라인 도움말 시작

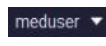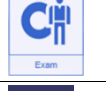	시스템 로그인 관리
	점검 절차 시작
	작업 공간 잠그기
	시스템을 종료하거나 다시 시작하는 옵션 제공
	Scan&GO
	Scan&GO Approved 스캔 프로토콜과 진단 범위의 선택
	Check&Go Check&Go 품질검사
	(Scan&GO) Exam / Home Exam : 스캔 워크플로를 시작합니다. Home (시스템으로 전환)
	CT View&GO 판독을 위해 환자 데이터를 CT View&GO로 로드합니다.
	Open(열기) 할당된 워크플로로 판독하기 위해 환자 데이터를 로드합니다. 워크플로가 할당되지 않은 경우, 기본 워크플로가 할당되고 워크플로가 시작됩니다.
	Open with(함께 열기) 워크플로를 선택하고 판독을 위해 환자 데이터를 로드할 수 있습니다.
	Print(인쇄) 선택한 데이터를 인쇄할 수 있도록 Print(인쇄) 워크플로 단계를 엽니다.
	DICOM Q/R 외부 매체 또는 DICOM 노드에서 스터디를 검색하고 읽어옵니다. 이 기능은 원격 DICOM 노드가 구성되어 있거나 로컬 클라이언트 PC에 DICOMDIR이 포함된 CD/DVD/USB 매체가 삽입된 경우에만 작동합니다.
	Import(가져오기) 외부 매체, 파일 시스템 또는 네트워크 노드에서 파일을 가져옵니다. 이 기능은 DICOMDIR을 사용할 수 없는 경우에도 작동합니다.
	Export(내보내기) DICOM 데이터를 외부 매체, 파일 시스템 또는 네트워크 노드로 내보냅니다.
	Correct(수정) 환자 데이터를 수정할 수 있습니다.

2) 환자 등록

(1) 영상시스템(syngo Acquisition Workplace)

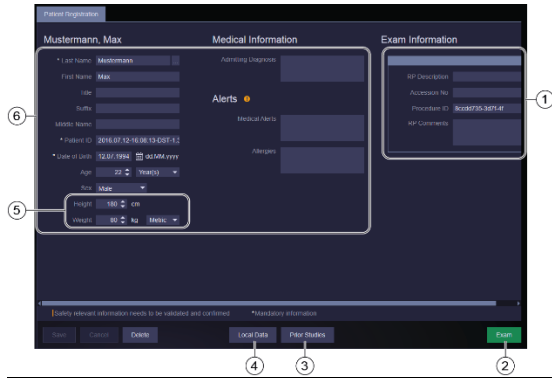

번호	명칭	설명
1	Exam information	검사 정보
2	Exam	검사 버튼 : 검사를 트리거합니다.
3	Prior Studies	이전 스터디 버튼 : 이전 스터디를 검색하기 위한 Prior Studies(이전 스터디) 대화 상자를 엽니다.
4	Local Data	로컬 데이터 버튼 : 선택한 환자에 대한 스터디를 볼 수 있는 Local Data(로컬 데이터)를 엽니다.
5	Height & Weight	Height(신장) 및 Weight(체중) : 환자 데이터를 RIS로부터 받은 경우에도 Height(신장) 및 Weight(체중) 속성은 검사가 시작되기 전에 편집할 수 있습니다.

(2) 환자 등록 순서

- Scheduler(스케줄러) 및 Local Data(로컬 데이터)의 도구 모음에서 환자를 조회 하거나 Add Patient(환자 추가) 아이콘을 클릭합니다.
- Patients(환자) 목록에서 새 항목이 생성되고 빈 Patient Registration(환자 등록) 탭이 열립니다.
- 필요한 환자 데이터를 입력합니다. 필수 필드에는 별표*가 붙습니다. 환자를 CT 스캐너에서 수동으로 등록할 경우, 별표(*)가 표시된 환자 이름 (Last name), 환자 아이디 (Patient ID), 생년월일 (Date of Birth)은 반드시 입력되어야 합니다
- 데이터를 저장하고 등록을 마치려면, Save(저장) 버튼을 클릭합니다. 또는 데이터를 저장하고 검사를 시작하려면 Exam(검사) 버튼을 클릭합니다.
- 새 환자가 등록됩니다.

3) 환자 배치 및 스캔

(1) 환자 테이블 배치

- 환자를 테이블에 편안하고 적절한 자세로 배치합니다. 선택적으로 위치 고정 보조 기구(헤드홀더, 환자 위치 고정용 스트랩, 헤드 암 서포트, 레그 서포트 등등)를 사용하여 환자를 고정할 수 있습니다.
- 원격 스캔 컨트롤(선택사항) 또는 제어 상자(Control Box)에 있는 Unload(테이블 내리기) 키를 누릅니다. 또는 테이블 풋스위치의 Unload(테이블 내리기) 페달을 밟습니다. 테이블이 겐트리 밖으로 이동합니다.



- 환자를 환자 테이블에 편안하고 적절한 자세로 배치 및 Table Position(테이블 위치) 대화 상자를 사용하여 테이블 이동 방향을 확인하거나 변경합니다.



	테이블을 겐트리 쪽으로 수평으로 이동합니다.
	테이블을 겐트리 밖으로 수평으로 이동합니다.
	테이블을 위로 이동합니다.
	테이블을 아래로 이동합니다.

- 검사 대상 신체 부위에서 장신구, 안경, 보철물을 제거합니다.
- 환자 테이블을 Topogram(토포그램) 시작 위치로 제어 상자의 키를 사용하거나 원격 스캔 컨트롤을 사용하여 테이블을 이동할 수 있습니다.
- 레이저 마커를 사용하여 Topogram(토포그램) 시작 위치를 정의 합니다.
- 환자 관찰용 2D 카메라(선택사항)를 제어합니다.
- 환자 자세 및 환자 자세 프로토콜을 설정합니다. 스캔을 시작하려면 먼저 환자 자세가 정확한지 확인후 진행합니다.
- Topogram(토포그램)을 활성화하려면 실행 제어에서 GO(이동)를 클릭 합니다. Topogram(토포그램) 스캔을 실시할 준비가 됩니다.




- 원격 스캔 컨트롤이나 제어상자에서 Start(시작)키를 눌러서 Topogram 및 스캔을 실행합니다



2) 프로토콜 선택

환자가 로드되면 현재 검사의 스캔 프로토콜을 선택해야 합니다. 스캔 프로토콜에는 특정 검사를 위한 사전 정의된 스캔 파라미터, 재구성 파라미터, 처리 파라미터가 포함됩니다.


(1) 영상시스템(syngo Acquisition Workplace)

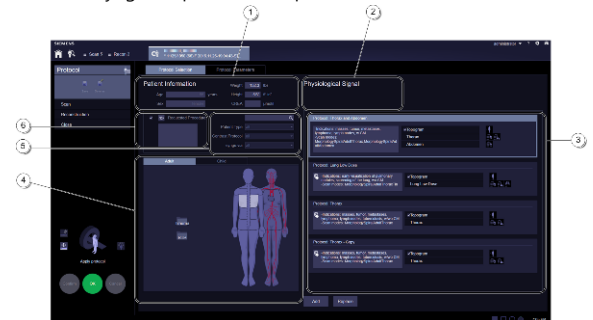

번호	명칭	설명
1	Patient Information area	환자 정보 영역. 환자 등록시 입력된 환자 세부정보가 표시됩니다.
2	Physiological Signal area	생리학적 신호 영역. Cardiac CT 검사에서 심전도 곡선을 표시합니다.
3	Protocol preview area	프로토콜 미리 보기 영역. 현재 필터 설정과 검색 기준에 기초하여 사전 선택된 프로토콜을 표시 및 선택할수 있도록 지원합니다.

4	Patient model area	환자 모델 영역. 성인(Adult)탭과 소아(Child)탭으로 구성되며, 신체영역이 있는 환자모델(표준 및 혈관, 연조직, 장기 등) 스캔할 신체 부위(Lung, Liver, Colon, Bone, Soft-Tissue, Cardiac, etc)를 나타냅니다.
5	Search area	검색 영역. 현재 환자에 대한 스캔 프로토콜을 선택할 수 있습니다.
6	Requested Procedure area	요청된 절차 영역. 현재 요청된 절차에 대한 스캔 프로토콜 매핑을 제어할 수 있습니다.

(2) 태블릿(선택사양)

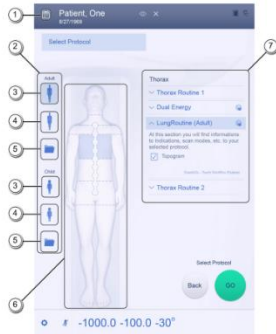

번호	명칭	설명
1	Scheduler	스케줄러 (Scheduler)
2	Adult and Child	환자 타입 (성인과 소아)
3	Standare Protocols	기본 프로토콜
4	Vascular Protocols	혈관 조영 검사 프로토콜
5	Special Protocols	특수 검사 프로토콜
6	Patient model	환자 모델 – 환자 부위별 프로토콜
7	Protocol preview area	프로토콜 미리 보기 영역

(3) CARE Dose4D(선택사양)

- CARE Dose4D는 스캔 중에 자동 노출 제어를 실시하여 최적화된 선량으로 모든 체구와 신체 부위에 대해 일정한 영상 화질을 제공합니다.
- Modulation(조정) 탭을 클릭합니다. Dose Modulation Configuration(선량 조정 구성) 윈도우가 열립니다. 조정 강도는 다양한 기관 특성과 다양한 환자 체구(Child(소아), Adult Slim(마른 성인), Adult Obese(비만 성인))에 대해 개별적으로 설정할 수 있습니다.
- Child(소아), Adult Slim(마른 성인), Adult Obese(비만 성인) 섹션에 요청된 CARE Dose4D 강도 값을 선택합니다. Very Weak(매우 약함), Weak(약함), Average(평균), Strong(강함), Very Strong(매우 강함) 중에서 선택할 수 있습니다.

(4) CARE Bolus CT(선택사양)

- 시간 표시 막대에서 Bolus Tracking(조영제 추적)에 대해 구성할 스캔 범위를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 컨텍스트 메뉴에서 Open Edit Mode(편집 모드 열기)를 선택합니다. 시간 표시 막대 위에 도구 모음이 표시됩니다.
- Bolus Tracking(조영제 추적) 아이콘을 클릭하여 시간 표시 막대에서 스캔

범위 앞에 강조 표시된 영역으로 드래그합니다.


(5) Osteo CT(선택사양)

- Osteo(골밀도) 위치 고정 매트리스(Osteo(골밀도) 매트리스, 젤 팩, 기준 팬텀 포함)를 사용하여 환자를 배치합니다.
- 표준 Siemens OSTEO 스캔 프로토콜을 사용하여 스캔을 수행 한 후 보정된 테이블 높이를 신중히 사용하십시오.

4) 이미지처리 및 재구성(Image Postprocessing & Reconsturction)

스캔이 완료되고 영상 화질이 승인된 후, Reconstruction(재구성) 작업을 진행할 수 있습니다.

(1) 영상시스템(syngo Acquisition Workplace)

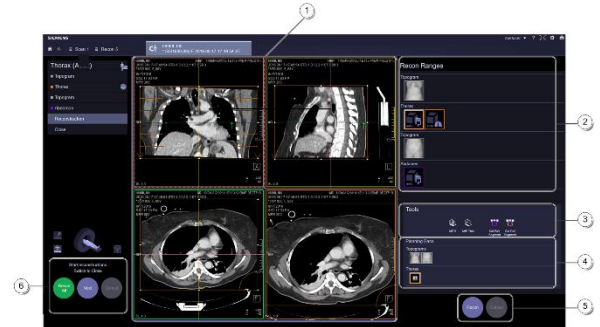

- Image Area(영상 영역)
- Recon Ranges Area(재구성 범위) 영역
- Recon Tools Area(재구성 도구) 영역
- Planning Base Area(계획 기반) 영역
- Recon control Area(재구성 제어 영역)
- Execution control buttons(스캔 후 실행 제어 버튼)

(2) 주요 도구모음

아이콘	명칭 및 설명
	Top left corner(상단 좌측 코너 메뉴) 이미지 조작 도구
	Top right corner(상단 우측 코너 메뉴) 측정과 표시 도구 모음
	Bottom right corner (우측 하단 코너 메뉴) 윈도우 조정 및 모달리티 별 프리셋
	Bottom left corner (좌측 하단 코너 메뉴) 시각화 기능 모음 및 이미지 타입
	Save Image 이미지 저장
	Scroll 이미지 탐색, 이미지 탐색을 위해서 좌클릭을 활성화
	Movie (이미지 동영상) 3D 볼륨 혹은 데이터 그룹간에 자동으로 탐색
	3D Reference Point (3D 기준 점) 환자의 동일 시리즈 혹은 다른 시리즈에서 환자의 위치를 자동으로 맞추는 도구
	Copy Image(이미지 복사)
	Copy Layout(레이아웃 복사)

	Distance Line(길이 측정) 2D, MPR, MPR Thick,
	Angle(각도 측정) 두 선분 사이의 각도 측정, 2D, MPR, MPR Thick, MIP Thin, MinIP Thin, MPR/MPR images
	(Recon&Go) Parallel Ranges(병렬 범위) 자동으로 생성된 병렬 범위로 재구성된 영상 시리즈를 생성하기 위한 유형. 서로 다른 기관 프리셋을 사용할 수 있습니다.
	(Recon&Go) Radial Ranges(방사형 범위) 자동으로 생성된 방사형 범위로 재구성된 영상 시리즈를 생성하기 위한 유형. 서로 다른 기관 프리셋을 사용할 수 있습니다.
	(Recon&Go) Lung CAD 자동으로 포함된 Lung CAD 결과로 재구성된 영상 시리즈를 생성하기 위한 유형.
	(Recon&Go) Parallel Vascular Ranges(병렬 혈관 범위) 자동으로 검출된 혈관과 자동으로 생성된 병렬 범위로 재구성된 영상 시리즈를 생성하기 위한 유형.
	2D 2D images 보기
	MPR MPR images 보기
	Rotate(회전) 2D image 혹은 3D volume 회전
	Zoom/Pan(확대/축소) 마우스로 이미지 확대 축소 및 이동
	Fit to Segment(화면에 크기 맞추기) 화면에 맞도록 크기 조정
	Fit to Acquisition Size(실제 크기에 맞게 조정) 원래의 획득 사이즈에 맞게 이미지 크기를 조정, 이미지의 관심 영역과 표시된 그래픽 객체가 최적화 된 방법으로 표시

5) 검사 마무리

- ① 작업 흐름 제어에서 Close(닫기) 작업을 선택합니다.
Job Status(작업 상태) 탭이 열립니다. Job Status(작업 상태) 탭에서는 모든 재구성 작업과 각각의 상태, 그리고 진행 중인 재구성, 완료된 재구성, 전송(DICOM) 노드, syngo.via 매퍼와 같은 자동 작업 설정에 대한 개요를 제공합니다.
- ② 해당하는 경우, Auto Tasking(자동 작업) 파라미터를 확인합니다. Job Status(작업 상태) 탭에는 스캔 프로토콜에 프리셋된 파라미터가 표시됩니다. 필요한 경우 재구성 전에 파라미터를 조정할 수 있습니다.
- ③ 실행 제어에서 Close(닫기)를 클릭합니다.
- ④ 환자가 닫힙니다. 모든 대기 중인 재구성 작업이 백그라운드에서 처리됩니다.
- ⑤ 완료되지 않은 재구성 작업이 있을 경우, 환자가 Recon Worklist(재구성 작업 목록)에 표시됩니다.

6) 기타구성품(호흡동조시스템, 선택사양)

(1) 시스템 설정



<검사실>

- ① 센서포트, 로드셀, 레이저 센터, 센서 및 파형 모니터가 검사실에 위치해 있습니다.
- ② 릴레이박스, 동조 비활성화 스위치 및 PC는 제어실에 위치해 있습니다.
- ③ 레이저 센서를 사용하는 경우, 환자를 침상에 눕히고 영상 또는 치료 시스템의 방사선조사 영역 내에 있지 않도록 합니다.
- ④ 환자가 볼 수 있도록 고정장치에 파형 모니터(옵션)를 설치합니다. 파형 모니터 또한 영상 시스템의 방사선조사 영역 내에 있지 않아야 합니다.

<제어실>

(2) 케이블 연결

- ① 센서 박스를 릴레이 박스에 연결합니다.
- ② 동조 비활성화 스위치를 릴레이 박스에 연결합니다.
- ③ 릴레이 박스를 PC에 연결합니다.
- ④ 전용 부속품을 PC에 연결합니다.
- ⑤ 각 구성품의 AC 전원 케이블을 연결합니다.
- ⑥ 센서 포트를 파형모니터(옵션)에 연결합니다.
- ⑦ 릴레이 박스를 접속함(옵션)에 연결합니다.

(3) 호흡 센서 연결


- ① 로드셀을 센서 포트에 연결합니다.
- ② 레이저 센서를 센서 고정장치(옵션)에 연결합니다

(4) 전원 켜기


- ① 센서 포트의 전원을 켜고, 시스템이 정상적으로 기능하는지 확인합니다.
- ② PC의 전원을 켜고, 애플리케이션 아이콘이 데스크톱 스크린에 표시되는지 확인합니다.

(5) 애플리케이션 시작

- ① PC의 애플리케이션 아이콘을 클릭하면, 애플리케이션이 시작되고 주 화면이 나타납니다.

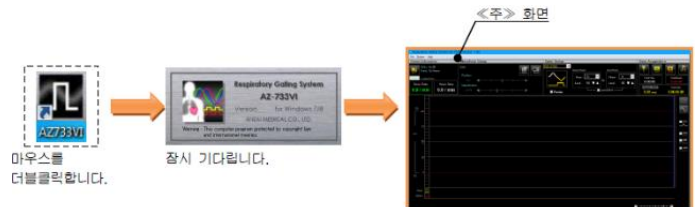

(6) 애플리케이션 화면

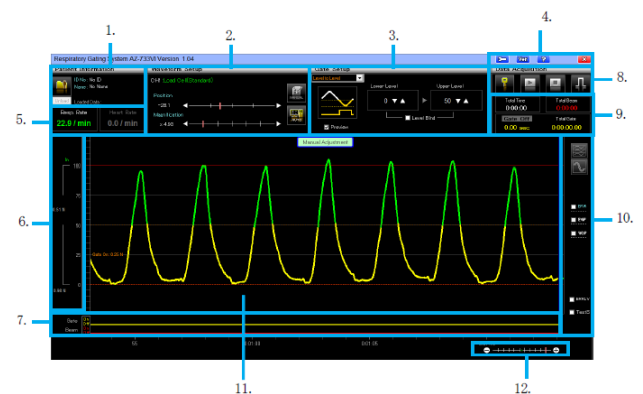

- ① 환자 정보
- ② 파형 설정
- ③ 동조 설정
- ④ 메뉴바
- ⑤ 호흡 수 및 심박수 표시부
- ⑥ 센서 측정 정보 표시부
- ⑦ 동조 신호 및 빔 신호 정보 표시부

- ⑧ 데이터 수집
- ⑨ 다양한 측정 데이터 정보 표시부
- ⑩ 호흡 파형 관련 표시 선택부
- ⑪ 호흡 파형 표시부
- ⑫ 시간 축 확대 바

(7) 환자 등록 및 업로드


① 신규 환자 등록

<Patient File Management> 아이콘을 클릭하여 등록



② 환자 정보 업로드


<Patient File Management> 창의 목록에서 정보를 로딩할 환자를 선택하여
<Load Patient Information> 아이콘을 클릭합니다.

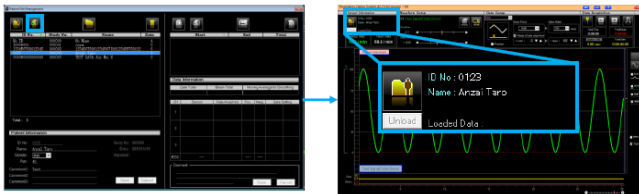

(8) 호흡 센서 고정

① 로드셀 고정

고정 벨트가 환자의 피부에 직접 닿지 않도록 착용해야 합니다. 환자에게 사용 시에는 의복 위에 벨트를 착용해야 합니다.

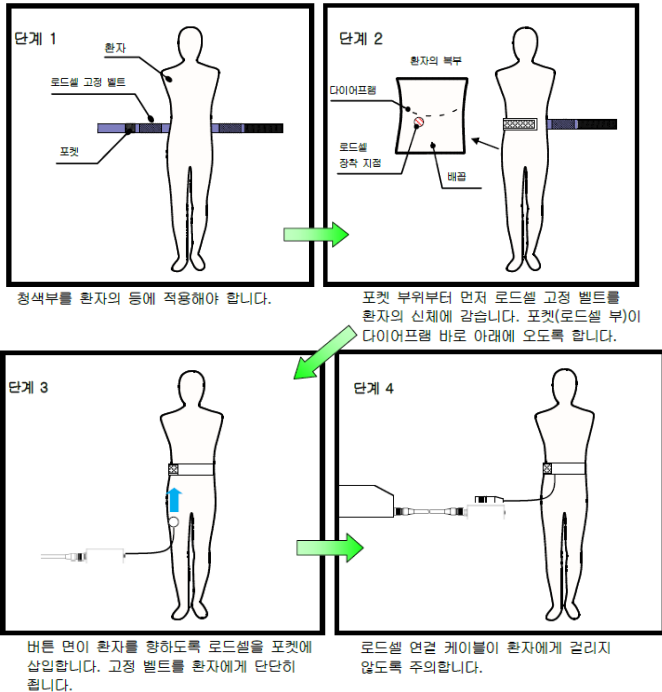

② 로드셀 장착 확인

"GOOD" 지시등이 점등되면, 로드셀 고정 벨트를 적절하게 씌웁니다.	
"LOOSE" 지시등이 점등되면, 로드셀 고정 벨트가 너무 느슨하게 고정된 것입니다. "GOOD" 지시등이 점등될 때까지 더 씌웁니다.	
"TIGHT" 지시등이 점등되면, 로드셀 고정 벨트가 너무 타이트하게 고정된 것입니다. "GOOD" 지시등이 점등될 때까지 풀어줍니다.	

③ 레이저 센서 고정


환자 침상에 레이저 센서 고정장치를 부착후 환자를 침상에 눕힙니다. 고정행들을 돌려 방향을 조정합니다.

(9) 환자의 관찰

검사 중에 환자를 관찰하며, 환자가 심하게 움직이는 경우, 필요 시 동조 신호를 차단합니다.

① 동조 신호 출력의 차단

동조 비활성화 스위치를 누르면, 동조 신호가 강제로 OFF 상태로 설정됩니다. 동조 신호 차단 중에, Gate Disable Switch On 메시지가 표시됩니다.

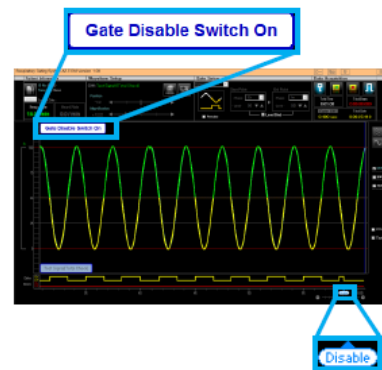

② 동조 신호 출력의 억제


동조 신호 출력이 허용된 상태에서 Gate On/Off 아이콘을 클릭하면, 동조신호 출력이 일시 정지됩니다



(10) 검사 종료


① 데이터 수집의 종료

외부 기기의 검사 중단을 확인하면, 데이터 수집이 종료됩니다

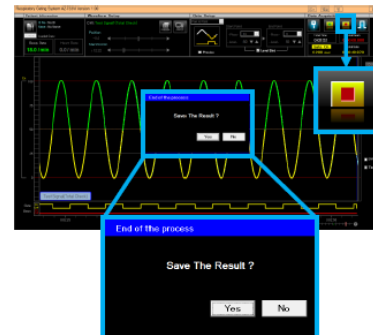

② 애플리케이션 종료

메뉴바의 아이콘을 클릭하면, <Main Display>가 닫히고 애플리케이션이 종료됩니다.

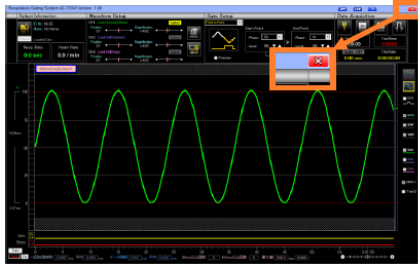

(11) 전원 끄기


- ① O/S를 종료하고 PC의 전원을 끕니다.
- ② 센서 포트의 전원을 끕니다.

다. 화상 성능 시험 (Quality Assurance)

Quality Check Phantom(CCR Phantom)을 사용하여 성능을 점검하며, 필요시 QC AAPM Phantom(이미지 품질 확인용), Dose PMMA(Dali) Phantom(피복선량측정용)을 함께 사용 할 수 있다.

1) 팬텀 구성

팬텀세트는 물 팬텀 (Water Phantom), 슬라이스 두께 팬텀(Slice Thickness Phantom), 와이어&볼 팬텀(Wire and Ball Phantom) 등으로 구성되어 있다.

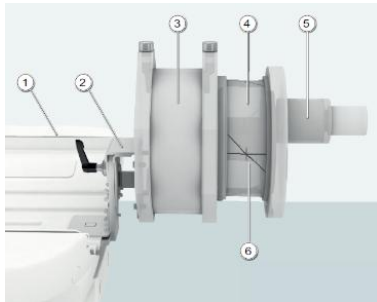

- (1) 환자테이블 상판
- (2) 팬텀 홀더
- (3) 물 팬텀
- (4) 슬라이스 두께 팬텀
- (5) 와이어 및 정렬 팬텀
- (6) 기준 마크

2) 항상성 검사 (Constancy test)

항상성 테스트 결과는 시스템에 저장되어 있는 기준 데이터와 비교하여 평가됩니다.

교체한 시스템 부품(예: 튜브)이 있는 경우 기준 데이터는 다시 결정되어야 합니다. 이는 기준 측정으로 결정할 수 있습니다.

품질테스트의 결과는 영상시스템(syngo Acquisition Workplace) 또는 태블릿(CT View&GO)에서 확인할 수 있습니다.

- (1) 라이트마커테스트 위치 수행 : 이 품질 테스트를 이용해 현재 슬라이스 평면에서 라이트마커의 편차를 결정합니다.
- (2) Sagittal 및Coronal 라이트마커테스트수행 : 이 품질 테스트를 사용하여 Sagittal 및 Coronal 라이트마커의 위치를 결정합니다.
- (3) Topogram(토포그램 배치테스트수행 : 이 품질 테스트를 통해, 미리보기 영상을 사용하여 단층 촬영면의 위치를 결정합니다.
- (4) 슬라이스 테스트 수행 : 슬라이스 두께는 슬라이스 두께 팬텀으로 결정됩니다. 각각의 슬라이스 두께에 대해, 팬텀의 Tomogram(토모그램)이 기록되고 여기서 실제 슬라이스 두께가 계산됩니다.
- (5) 균질성 테스트 수행 (Homogeneity / Water(균질성/물)) : 이 테스트를 통해 물 팬텀의 5개 영역에서 CT 값의 균질성을 측정합니다.
- (6) 노이즈테스트수행 : 픽셀 노이즈는 일일 품질 측정에 사용되는 것과 동일한 방법으로 물 팬텀의 두 Tomogram(토모그램)으로부터 결정됩니다.
- (7) MTF 테스트수행 : 공간 분해능은 변조 전달 함수(Modulation Transfer

Function, MTF)를 통해 특성화됩니다. 공간 분해능은 이상적인 전달을 기준으로, 영상에 표시되는 다른 로컬 주파수를 가진 대조도 진폭을 나타냅니다. 실제로, MTF 값은 공기 중에서 단 하나의 얇은 와이어를 사용하여 결정됩니다.

- (8) 대조도테스트수행 : 이 테스트를 통해 대기과 수중에서 대조도를 측정합니다.
- (9) 테이블배치테스트수행 : 이 품질 측정을 통해 실제 테이블 위치가 표시되는 테이블 위치와 일치하는지 테스트합니다.
- (10) CTDI 공기테스트수행 : 이 테스트로 시스템 축의 선량을 측정합니다.
- (11) 관전압테스트수행 : 이 품질 테스트를 통해, 실제 관전압을 각 이용 가능한 관전압에 대한 예상 전압과 비교할 수 있습니다.
- (12) 저 대조도 테스트 수행 : 저 대조도 테스트는 시스템 설치 중 및 구성 요소 관련 영상 화질의 교체 후 수행되어야 합니다. 저 대조도 테스트를 수행할 수 있는지 여부는 국가마다 다릅니다.

라. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 환자테이블, 겐트리 등을 장치 사용전 상태로 복구한다.

- 2) 장비사용 완료 후 각종 전원 스위치를 차단한다.

- (1) 제어 장치에서 전원을 OFF한다.
- (2) 장치 전원을 차단하기 전에 장비에서 행하여지는 모든 작업이 종료되었는지 확인한다.
- (3) 엑스선 관 등의 보호를 위해 장비 사용 직 후 전원을 곧바로 차단하지 않는다.

3) 청소방법 및 고객지원 서비스

- (1) 시스템 및 구성품은 전원을 차단 후 실시한다.
- (2) 시스템 및 환자 테이블의 표면을 청소 후 물기가 제품 안으로 들어가지 않도록 하며, 표면에 남지 않도록 한다.
- (3) 내부 청소를 위하여 내부를 임의 분해하지 말며, 필요시 Siemens로 문의하도록 한다.
- (4) 시스템의 조인이 필요하거나 시스템에 문제가 발생할 경우, 원격지원(Siemens Remote Service)을 연결하여 지원을 받을 수 있습니다.
- (5) 시스템의 정기 유지보수 및 서비스는 사용자 및 환자의 안전에 중요합니다. 교육을 이수하고 인증을 얻은 기술자가 수행해야 합니다.
- (6) 시스템 오작동이 감지되면 시스템을 즉시 종료하고 Siemens 고객 서비스 부서에 문의합니다.

[사용 시 주의사항]

가. 장치의 사용 전 주의사항

- 1) 온도 및 습도를 상온상태로 유지할 것 (온도 18 – 30 °C, 습도 20-75%)
- 2) 기계를 사용하기 전에 사용자는 안전과 관련된 모든 부분의 기능을 정확히 이해하고 사용할 수 있어야 하며, 사용 시 안내사항 및 램프 등을 주의 깊게 관찰하여야 한다.

나. 장치의 사용 중 주의사항

- 1) 기계, 장치에 강한 충격을 가하지 말 것
- 2) 무리한 촬영조건에 설정, 조사하지 말 것
- 3) 정격 전원을 사용할 것
- 4) 기계 주변의 종사자는 납이 함유된 보호용 에이프런을 착용할 것
- 5) 촬영 중 긴급한 상황이 발생 시는 응급정지 스위치를 눌러 엑스선 발생의 중지과 침대의 구동을 정지시킬 것

- 6) 검사 중에는 반드시 CT 검사실 문을 닫을 것.
- 7) 환자의 검사를 돕기 위해 CT 검사 중 검사 실로 들어가게 되었을 때는 방사선 방어용 에이프런을 착용할 것.
- 8) 기계, 오작동으로 인해 표시되는 경고 표시 창을 제어 모니터에서 항상 확인할 것
- 9) 환자 또는 사용자의 눈이 레이저 광선에 노출되지 않도록 할 것. 환자에게 레이저 마커를 들여다보지 말라고 지시해야 합니다. 환자 또는 사용자의 눈이 레이저 광선에 노출되거나 광학 기기의 레이저 광선을 보면 눈이 손상될 수 있습니다.
- 10) 움직이는 부품에 의해 환자가 부상을 입을 수 있습니다. 환자복 또는 머리 카락이 기계 부품에 끼지 않았는지 확인하며, 주입관과 호흡관, 카테터와 심전도 케이블 등이 부품사이의 공간에 끼지 않았는지 확인합니다.

다. 장치의 사용 후 주의사항

- 1) 엑스선 관 등의 보호를 위해 장비 사용 직후 전원을 곧바로 차단하지 말 것
- 2) 장비 사용 후 각종 전원 스위치를 차단한다.
- 3) 인체 또는 환경에 유해한 시스템 구성 요소는 관련 규정에 따라 주의하여 폐기해야 합니다. 환경적으로 관련이 있는 구성 요소의 예로는 축전지와 배터리, 변압기, 콘덴서, 음극선관, 모니터 브라운관 및 팬텀이 있습니다.

라. 고장시 조치

- 1) 장치의 고장시에는 담당자의 판단에 근거하여 전원, 퓨즈 등의 이상유무를 확인할 뿐 마음대로 만지지 말고 적절한 표시를 하고, 수리는 제조, 수입업소 또는 수리업소의 전문가에게 의뢰한다.

마. 보수 점검

- 1) 장치의 취급이나 보수에 관하여 필요한 사항은 취급설명을 참고로 할 것.
- 2) 장치 및 부품은 반드시 정기 점검을 행할 것.
- 3) 오랫동안 사용하지 않던 장치를 다시 사용하는 경우에는 완전하게 정상적으로 작동되고 있음을 확인할 것.
- 4) 본 제품 설치, 수리 시에는 제조사로부터 확인 받은 부품 (본 제품에 포함, 사용되는 축전기, 컨버터, 배터리, 정류 기기, 카메라, 스피커, 전구, 램프 홀더, 케이블, 라우터, 스위치, 허브, 프린터, 카드판독기, 포스시스템 등 같은 전기 부품, 그리스, 냉각수, 누출감지염료, 세척제, 실런트, 에폭시, 윤활제, 작동유, 접착제, 페인트) 을 사용한다.
- 5) 외장 장비(외장 드라이브, CD, DVD, 카드판독기, PACS 등)를 연결하지 않거나 장비가 올바르게 작동하지 않으면, 스캔을 할 수 없거나 정확한 스캔 결과를 얻을 수 없습니다. 스캐너를 사용하기 전에 모든 외장 장비의 전기 연결 및 작동이 올바른지 육안으로 검사하십시오.
- 6) 시스템의 조연이 필요하거나 시스템에 문제가 발생할 경우, 원격지원 (Siemens Remote Service)을 연결하여 지원을 받을 수 있습니다. 교육을 받은 사용자만 시스템 네트워크에 원격으로 접근할 수 있도록 해야 합니다.

바. 경고의 표시

1) 유지관리 주의

- 사용자는 사용자 일상 체크 프로그램 및 계획된 유지프로그램이 시행되기

전에는 장비를 사용해서는 안 된다.

장비손상 또는 잘못된 조작의 경우, 장비 수리 전까지 사용해서는 안 된다.

2) 위험 인식

- 안전한 사용방법을 교육받은 사용자가 장비를 사용할 수 있다.

3) 기기변조 금지

- 제조사 엔지니어 이외의 수리 업자가 장비의 안전에 영향을 미치는 기기 이동, 변조 등을 금지하며, 이로 인하여 기기 안전이 손상된 경우 심각한 치명적 상해를 야기할 수 있다.

4) 폭발 안전

- 이 장비는 무 자극의 폭발성 가스나 수증기가 있는 장소에서는 사용을 제한한다. 가연성 또는 폭발성 소독 스프레이 등 합성 수증기는 장비의 장애를 일으키므로 사용해서는 안된다. 화재 발생에 대비하여, 소화기 사용 방법과 탈출 경로를 숙지하고 있어야 한다.

5) 화재안전

- 의료구역에서 사용의 안전을 위해서 화재단속은 엄격하게 적용된다. 화재 진압기는 전기적, 비전기적 화재 모두를 다룰 수 있어야 한다. 의료 전자 장비의 모든 조작자는 소화기의 사용과 다른 소화 장비의 사용을 숙지하여야 한다. 전기 또는 화학 화재의 경우 특별히 제작된 소화기를 구비하여야 하며 전기화재의 경우 물 종류를 소화매체로 사용하는 것은 위험하다.

사. 기타 주의사항

1) 인체상태에 대한 주의 사항

- 불필요한 방사선 사용을 금지할 것.
- 가능한 짧은 조사시간을 사용할 것.
- 가능한 경우 자동 AKR로 (Air Kerma Range: 자동 조사시간범위) 조정할 것.
- 방사선 방어용 에이프런 착용할 것.
- 방사선 조사 모니터링 배지 착용할 것.
- 가능한 최대로 피검자-초점간 거리를 유지할 것.
- 방사 빔으로부터 모든 불필요한 불분명한 사물을 제거할 것.
- 조사 부주의한 작동에 의한 유출방지를 위해 조사 멈춤이 금지된 경우를 제외하고, 모든 경우에 방사선 조사 금지 스위치를 사용할 수 있다.

2) 전문의의 처방에 따른 사용상의 주의사항

- 임신상태를 인지한 산모의 방사선 검사 또는 치료동안 배아 또는 태아의 보호를 위해 전문의 처방에 따른 특별한 고려가 요구된다.
- 민감한 인체 기관들(눈, 생식기관)은 작동 빔이 조사될 때는 언제나 보호shield 되어야 한다.
- 급성 스킨 화상 (환자주의사항), 급성 모발 손실 (환자주의사항) 방지를 위해 전문의의 안전규칙을 따른다.
- 만성 방사선 상해 (직원 주의사항) 방지를 위해 방사선 안전규칙을 따른다.
- 신생아나 소아에 대해서는 반드시 정해진 프로토콜을 사용하여 방사선 피폭을 최소화할 것.

3) 사용상 부주의에 따른 치명적인 부작용, 사고 발생 등의 주의사항

- 시스템 작동 응급이벤트의 경우, 수동 조작을 제외한 모든 자동작동을 금지하기 위해 "응급전원 OFF"키를 누른다.
- 환자가 관여된 임상적 응급상황에서는 지역적 메인 스위치를 OFF하고 [응급멈춤] 키 사용하지 않는다.
- 목걸이, 종이 클립 또는 액체를 포함한 어떤 물체도 시스템 내부로 들어가지 않도록 하십시오(감전, 단락 위험).
- 스캔 전에 환자에게 연결된 모든 선의 범위를 확인합니다. 튜브, IV, 케이블 및 환자 리드는 길이가 충분해야 하고 테이블 이동 시 걸리거나 밟히지 않도록 해야 합니다.

4) 안전사고의 예방에 필요한 주의사항

- 절연 트랜스포머를 겸한 다중 이동 소켓 아울렛은 바닥에 위치해서는 안 된다.
- 절연 트랜스포머를 겸한 다중 이동 소켓 아울렛은 본 장비 전용으로 사용되어야 한다.
- 본 기기는 다른 전기용품과 같이 사용하는 것을 삼간다.
- 콘솔(키보드, 마우스, 제어 상자) 주변에서는 음료와 음식물을 주의해서 취급해야 하며, 장비에 음식물과 음료가 들어갈 경우 오작동을 유발할 수 있습니다.
- 배터리의 잘못된 취급 및 단락 전류로 인해 감전 또는 화상을 입을 수 있습니다.

5) 환자테이블(진료대)에서의 환자관리 주의사항

- 환자가 환자테이블(진료대)에 자세를 고정하는 동안 또는 그 후, 진료대 위에서 자세를 바꾸는 동안 또는 진료대에서 내려오기 전 및 그 동안, 환자가 충분히 또는 아예 고정되지 않으면 떨어져서 다칠 위험이 있으므로 아래의 내용을 포함하여 환자 고정 및 관련된 조치가 적절히 이루어지도록 유의한다.
- 환자가 환자테이블 위에 있을 때는 항상 감시할 사람이 옆에 있어야 합니다.
- 환자를 안정된 상태로 고정하는데 있어 고정 벨트 등의 해당 부품을 사용한다.
- 매트리스가 접착 밴드 등으로 환자테이블에 고정되어 있는지 확인한다.
- 환자 이동 침대 또는 들것이 환자테이블과 나란히 위치하고, 사이에 빈 공간이 없도록 세운다.
- 환자 이동 시 들 것과 침대의 브레이크를 사용한다.
- 환자 테이블, 환자 이동 침대, 들 것 등의 기계의 자동적 움직임을 방지하기 위해 해당되는 스위치를 누르거나 조정 기능을 잠시 중지한다.

6) 펄스형태의 연속된 X선빔을 조사하는 장비에 대한 주의사항

- 이식형인공심장박동기, 이식형심장충격기의 이식부위에 펄스형태의 연속된 X선빔을 조사 하는 경우, 이들 기기가 부적절한 기능장애 (malfunction)를 일으킬 가능성이 있음. 이에 X선빔이 인공심장박동기, 이식형심장충격기에 직접 조사 되는 것을 되도록 피하고, 짧은 시간동안 X선 출력을 최소로 설정하여 사용할 것.

7) 영 • 유아를 대상으로 한 사용 시 주의사항

- 소아 방사선 검사에서의 환자선량 권고량을 준수할 것
- 엑스선 촬영 전 임신 가능성이 있는 가임기 여성에 대해 임신여부를 확인한 후 촬영하도록 안내
- 영유아 촬영 시 생식기 보호대를 이용하여 생식기를 보호한 후 촬영하도록 안내
- 불필요한 피폭을 막기 위해 영유아의 체형에 맞는 적절한 콜리메이션을 하도록 함
- 영유아의 움직임으로 불필요한 재촬영을 막기 위해 보호자를 동반하여 촬영하도록 안내

8) 사이버보안에 대한 조치

- 본 의료기기는 보안 네트워크 내에서 연결하고 조작해야 한다, 의료기기의 사용 중 발생하는 사이버 보안 사고 발생 시 수입사로 연락을 취하도록 한다

[저장방법]

- 온도 : 18 ~ 30 °C
- 습도 : 20 ~ 75 %

[인공지능기술이 적용된 디지털의료기기에 대한 정보]

- (1) 인공지능 모델의 훈련방법 및 학습데이터의 정보
<학습데이터수>

- FAST Direction: 6,071
- FAST Range: 6,071
- FAST Isocentering: 3,407
- FAST Planning ALPHA: 4,772
- FAST ROI : 1,151
- Check&Go
 - o Coverage : 4,772 CT 토포그램 이미지
 - o Cotrast : 472 CT 3D 볼륨 및 3,783 CT dicom images
 - o Metal Detection : 3,612 토포그램
- myNeedle Detection
 - o Global Segmentation Network : 1,745
 - o Refinement Segmentation Network : 806
 - o

(2) 예측되는 성능의 범위 및 한계

- FAST 3D Camera
 - FAST Direction: 방향 인식 정확도 95% 이상
 - FAST Range: 신체 주요 지점의 좌표 인식 시 정확도 95% 이상(수평거리 오차 5cm 미만)
 - FAST Isocentering: Isocenter 인식 시 정확도 95% 이상(수직거리 오차 2cm 미만)
- FAST Planning (FAST Planning ALPHA)
 - 영역 계산 시간 소요 시간 900ms 이하
 - 각 계산된 장기(organ)별 범위에 대한 사용자 수용비율 90% 이상
- FAST ROI
 - 영역 계산 시간 소요 시간 250ms 이하
 - 사전 모니터링 슬라이스에서 혈관 내강을 포함하여 탐지되는 ROI 90% 이상
- Check&Go
 - Coverage : 알고리즘의 계산시간은 1900ms를 초과하지 않으며, CT 볼륨의 80%에서 topogram 기반 계획 범위에 대해 정확하게 추정한다.
 - Contrast : 알고리즘의 계산시간은 3.5s를 초과하지 않으며, CTA 볼륨의 90%에 대해 CM의 존재 및 균질성을 정확하게 추정한다.
 - Metal Detection : 계산 시간은 1200ms를 초과하지 않으며, 90%에서 감지된 금속물체의 존재는 정확 해야한다.
- myNeedle Detection
 - 모든 바늘의 90%에서 바늘 끝을 오차 5mm 미만 및 5도 미만으로 감지한다.
 - 바늘 진행 중 바늘 정렬 뷰를 확보하기 위한 사용자 개입이 필요하지 않다.

[제조번호, 제조연월]

하드웨어 시스템에 부착된 라벨 참고

[디지털의료기기 수입업자 상호 및 주소]

지멘스헬시니어스㈜

서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 10층 (서초동)

(Tel: 080-022-2585)

부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

개정 일자: 2026년 8월