

Prueba de antígeno COVID-19 escalable en minutos

Vaya por delante de la propagación con pruebas accesibles para todos


siemens-healthineers.com/clinitest-covid-antigen



Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 CLINITEST

La Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 de flujo lateral CLINITEST®, distribuida por Siemens Healthineers, es de lectura visual y fácil de usar, con resultados en solo 15 minutos. No se requiere personal o equipo de laboratorio especializado. Las muestras nasales pueden ser recolectadas por un profesional de la salud o una persona común bajo la supervisión directa de un profesional de la salud, en cualquier lugar y en cualquier momento.^{1,2} Cuando se utiliza como parte de una estrategia integral, la Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 CLINITEST puede ayudar a las comunidades a adelantarse a la propagación.

¡Nuevo!
Analice
Individuos con
o sin síntomas
de COVID-19

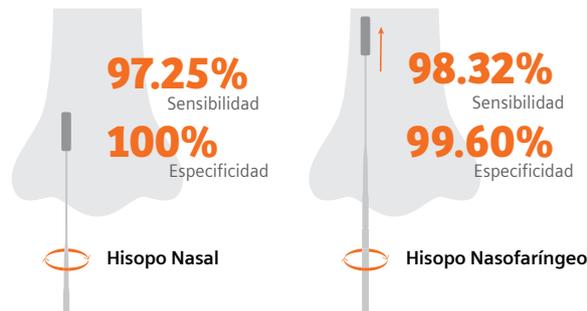

Prueba rápida, resultados confiables

Resultados precisos en solo 15 minutos



Pruebas escalables para la gestión de la salud de la población

Realizar pruebas a personas con o sin síntomas de COVID-19, donde más lo necesite.



Elimina las barreras tradicionales de acceso

No necesita personal ni equipo de laboratorio especializado¹; las muestras nasales pueden ser recogidas por una persona común bajo la supervisión directa de un profesional de la salud.²

1. La prueba no precisa de profesionales de laboratorio especializados pero deben ser tomada y supervisada por un profesional de la salud.
2. El modo de uso CLINITEST como auto-prueba self test con la supervisión de un profesional de la salud está sujeto a las restricciones regulatorias de cada país.
Por favor consulte con su representante local el modo de uso autorizado por las autoridades competentes.

Información Adicional de Producto

El rendimiento clínico de la Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 CLINITEST se evaluó en siete sitios dentro de los EE. UU. donde los pacientes fueron inscritos y evaluados. Las pruebas se realizaron en varios sitios, entornos clínicos y operadores diferentes. Los conjuntos de datos resultantes para el muestreo nasal anterior y nasofaríngeo cumplen con los requisitos más recientes de la mayoría de las principales autoridades reguladoras y demuestran un rendimiento de alta calidad.

Desempeño Hisopo Nasofaríngeo

Método	PCR (Hisopado Nasofaríngeo)		Resultado Total	
	Resultado	Positivo		Negativo
Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 CLINITEST (Hisopo Nasofaríngeo)	Positivo	117	3	120
	Negativo	2	743	745
Total		119	746	865

Sensibilidad Relativa: 98.32% (95% CI: * 94.06% to 99.80%)

*Intervalo confianza

Especificidad Relativa: 99.60% (95% CI: * 98.83% to 99.92%)

Exactitud: 99.42% (95% CI: * 98.66% to 99.81%)

Desempeño Hisopo Nasal

Método	PCR (Hisopado Nasal)		Resultado Total	
	Resultado	Positivo		Negativo
Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 CLINITEST (Hisopo Nasal)	Positivo	106	0	106
	Negativo	3	128	131
Total		109	128	237

Sensibilidad Relativa: 97.25% (95% CI: * 92.17% to 99.43%)

*Intervalo confianza

Especificidad Relativa: 100% (95% CI: * 97.16% to 100%)

Exactitud: 98.73% (95% CI: * 96.35% to 99.74%)

Especificaciones del Producto

Tiempo de Resultado: 15 minutos

Tipo de Muestra: Hisopo nasofaríngeo o nasal anterior

Almacenamiento: Temperatura ambiente o refrigerado (2–30°C)

Vida Media: 24 meses desde la fecha de fabricación

Antígeno detectado: Nucleocápside

Controles de Antígeno CLINITEST COVID-19

Contenido del kit: 5 hisopos de control negativo (azul) y 5 hisopos de control positivo (rojo), cada uno envuelto individualmente

Almacenamiento: Temperatura ambiente o refrigerado (2–30°C)

Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación

CLINITEST es una marca comercial de Siemens Healthcare Diagnostics Inc., o sus afiliadas. Todas las demás marcas comerciales y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

No está disponible para la venta en los EE. UU. La disponibilidad del producto puede variar según el país. Distribuida por Siemens Healthineers. Comuníquese con su representante local para conocer la disponibilidad. Para obtener especificaciones adicionales y datos de rendimiento, consulte las instrucciones de uso.

Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Teléfono: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Publicado por

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
2 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062-4637
USA
Teléfono: +1 781-269-3000

Información de Contacto Local

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
Cerro El Plomo 6000, Piso 10
Las Condes
Santiago Chile
Teléfono: +56 2 2477 1529