



teamplay

有哪些 新功能?

发现最新特性和功能

尊敬的 teamplay 用户,


如今有超过 1,850 个机构¹ 在使用 teamplay, 作为 teamplay 用户您可期待着新软件发布。最新版本为 teamplay 解决方案带来了新的关键特性和增强, 将可帮助您更高效地管理图像处理队列表²

作为 teamplay 用户, 您将自动获得新特性和功能的访问权限³。下面的简明概述中突出了最新的功能和您将获得的优势。

有什么新功能?


整体上:

- 登录和注册页面采用全新的设计, 更能引人注目。
- 如果您身在美国或欧盟 (除塞浦路斯、马耳他和斯洛文尼亚之外), 您将可通过仪表盘页面上的新标题直接进入 Siemens Healthineers Store, 在这里您可以找到更多应用程序⁴。

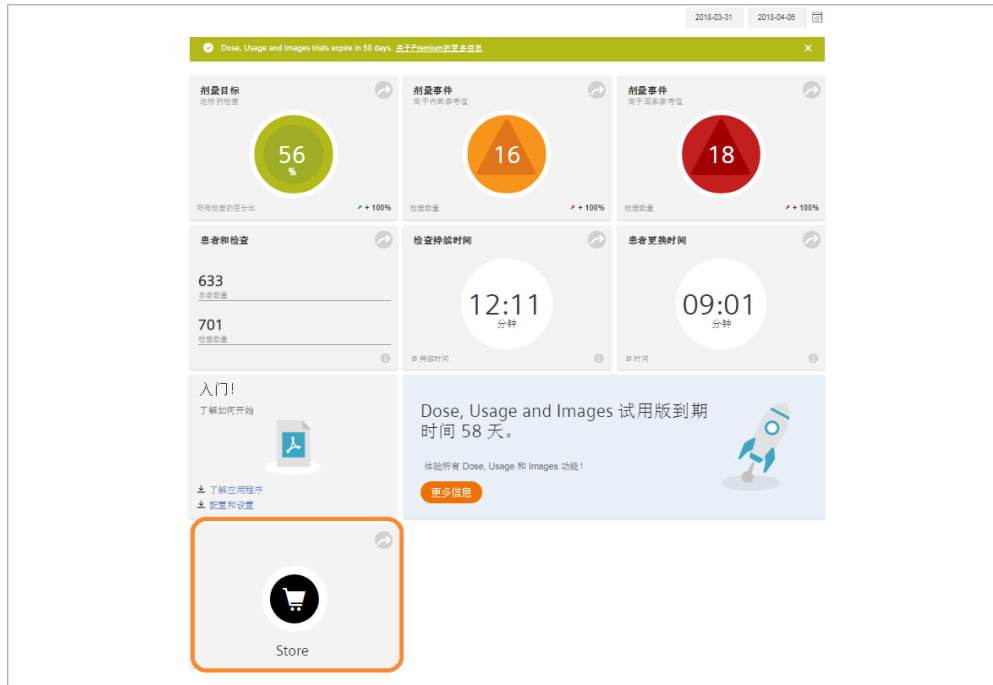

teamply Dose:

- 新功能增强了基准*。全球基准可供您将您的机构与世界各地的其他参与者进行比较。如果您想比较自己的参考值与基准值,现在可从侧面板上选择剂量参考值。“参考值 (TP)”是指 teamply 辐射剂量参考值,基于对现有全球参考值进行的插值。如果您所在的国家/地区尚未提供,这可作为关于参考值的有用指南。

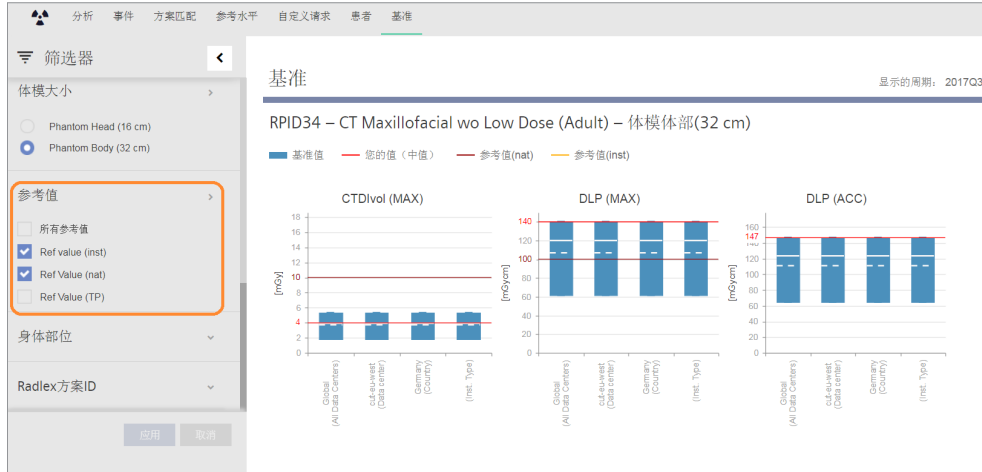

- teamply 中包含了来自不同设备的其他 DICOM 信息,以支持您进行更精确的研究。
核医学: 滤波器材料、滤波器厚度 (mm)、压迫厚度和压迫力
核医学: 放射性药物名称、同位素名称和放射性药物 ISO 代码
- 来自日立 CT 扫描系统的自动标测和处理数据中的整体改进可能有助于提供更流畅的工作流,以及您的图像处理扫描系统队列表的完整性能概述。

teamply Images/teamply Images Research⁵:

现在, 可以通过登记的主电子邮件地址轻松地找到收件人。




- 与第三方共享临床图像和检查时, 检查传输状态显示在此处。现在, 您可以查看图像发送到的第三方应用程序的标识并检查其状态。

teamply Protocols^{6*}

- 现在, 您可以访问 MR 方案中心。通过此功能, 可以轻松地选择和分发您的队列表中的 MR 扫描方案。在 [MAGNETOM World](#) 网站上, 您将可找到同行机构和顶级专家发布的相关临床病例。通过拖放或复制-粘贴操作将扫描方案从 MAGNETOM World 网站直接传输到 MR 方案中心, 从这里您可以轻松地将此方案分发到您的队列表中的所有已连接 Siemens Healthineers MRI 机器。



- CT 方案资源管理器增加了更多筛选条件, 以便于您更快地找到自己搜索的方案。例如, 选择扫描系统型号或方案文件夹。

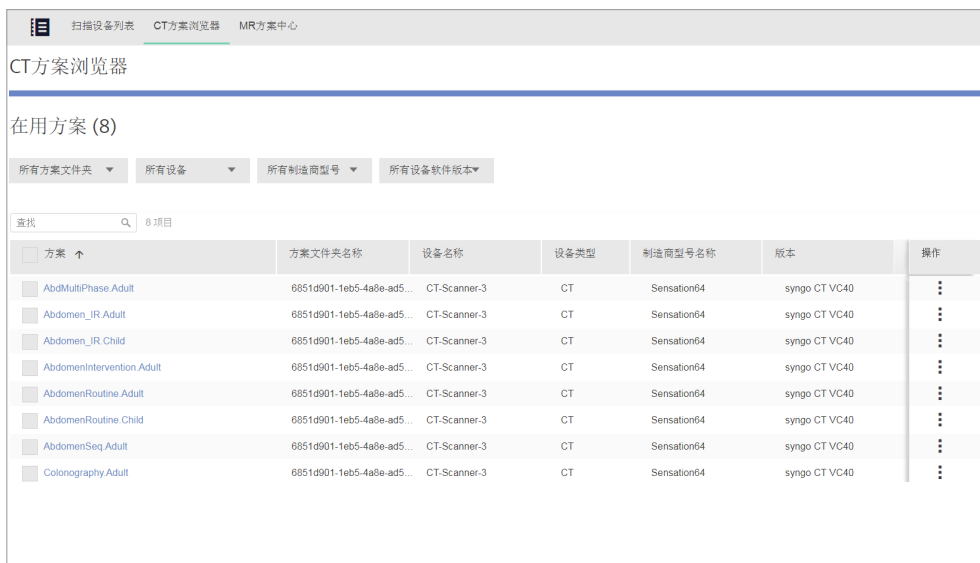

- 从现在开始, 我们将可提供 teamply Protocols BASIC*, 作为交互方案管理的网关。通过 teamply Protocols BASIC, 可以查看您的所有 Siemens Healthineers CT 扫描系统的方案树, 包括所有扫描方案及其扫描和重建参数。修改方案时, 新版本将会添加到 teamply, 可以轻松进行比较。分析视图增加了应用的辐射值, 因此您可从单一屏幕获得您需要的所有重要信息。CT 方案资源管理器可为您显示队列表中的 Siemens Healthineers 设备的全套 CT 扫描方案。还包括了 MR 方案中心, 这样您可以从 MAGNETOM World 网站获取专业 MR 扫描方案, 并在队列表中的 Siemens Healthineers MR 之间分发这些方案。

免责声明:

- ¹ 机构是指所连接客户的物理地点
- ² teamplay 产品和服务在有些国家/地区尚未上市。如果出于法规或其他原因, 服务在任何国家/地区未上市, 则无法保证提供该服务。请联系您的当地西门子组织, 了解更多详情。
- ³ 前提条件包括: 与临床网络的 (无线) 连接、满足推荐的最低硬件要求和符合当地数据安全法规。
- ⁴ Siemens Healthineers 数字生态系统正处在开发阶段, 尚未在美国和其他国家/地区上市。如果出于法规或其他原因, 服务在特定国家/地区未上市, 则无法保证提供该服务。
- ⁵ teamplay Images Research 不适合用于临床用途。DICOM 查看器不适合用于诊断显示。
- ⁶ teamplay Protocols 支持所选的 Siemens Healthineers 扫描系统。请联系您的 Siemens Healthineers 代表, 以了解更多详情。
- * 收费应用程序; 基准选项的可用性取决于为保证客户匿名性并受到保护而需要考虑的用户最小数量。

.....
Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany
电话: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com