

Kit de reactivos para Preparación de muestras VERSANT 1.0



Una solución flexible y confiable para extraer ARN viral para pruebas de COVID-19.

siemens-healthineers.com/versant-sample-prep1



El kit de reactivos para preparación de muestras 1.0* ayuda a mejorar la calidad de los ácidos nucleicos extraídos de muestras clínicas, a la vez que aumenta la eficiencia de su laboratorio para gestionar mejor el creciente volumen de pruebas. Esto puede ser especialmente crítico durante el pico estacional o durante un brote global, como la pandemia de COVID-19. Los ácidos nucleicos de alta calidad dan como resultado un mejor desempeño de las aplicaciones moleculares, que le permiten brindar a los médicos resultados de pruebas más confiables para el manejo del paciente.

Extracción de ácidos nucleicos de alta calidad

- Extracción de muestras clínicas de uso habitual incluyendo muestras respiratorias†
- Hisopos nasales, hisopos nasofaríngeos, hisopos orofaríngeos, lavado/ aspirado nasofaríngeo o aspiración nasal
- Lavado broncoalveolar (BAL)



*CE-IVD La disponibilidad del producto puede variar por país.

†Consulte las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones o limitaciones específicas.


El kit de reactivos de preparación de muestras VERSANT 1.0 proporciona:

Reactivos de diagnóstico In vitro (IVD) para uso clínico


- Reactivos listos para su uso no requieren preparación
- Enviado y almacenado a temperatura ambiente o a 2–8°C (Proteinasa K)

Tecnología probada

- Partículas magnéticas patentadas recubiertas con una nanocapa de sílice
 - Dan como resultado una extracción eficiente de ácidos nucleicos de alta calidad
- Partículas magnéticas de tamaño y forma homogénea
 - Mejora la reproducibilidad, la recuperación y la calidad de los ácidos nucleicos
 - Estandariza y mejora el desempeño de las aplicaciones moleculares como PCR en Tiempo Real

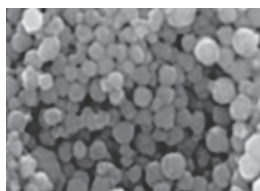


Nano partícula magnética
Siemens Healthineers

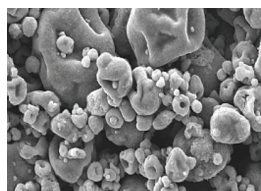

Otras perlas disponibles
comercialmente

Opciones de flujo de trabajo flexible

- Flujo de trabajo automatizado en el Sistema Molecular VERSANT kPCR que procesa hasta 192 muestras por día de trabajo
- Protocolo manual para necesidades de menor volumen

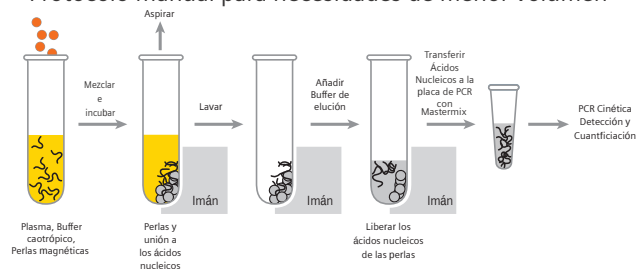

Información sobre pedidos

SMN	Descripción
10286026	VERSANT Sample Preparation 1.0 Reagents, Box 1 (96 extracciones)
10286027	VERSANT Sample Preparation 1.0 Reagents, Box 2 (96 extracciones)
10282928	Sistema Molecular VERSANT kPCR SP
10720881	Sistema Molecular VERSANT kPCR AD

Conozca más:

siemens-healthineers.com/versant-sample-prep1

VERSANT y todas las marcas asociadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o sus afiliadas. Todas las demás marcas comerciales y marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro y está sujeta a distintos requisitos normativos. Comuníquese con su representante local para conocer la disponibilidad.

Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Publicado por

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Molecular Diagnostics
725 Potter Street
Berkeley, CA 94710-2722
USA
Phone: +1 510-982-4000